


## Alikvot və ya Törəmənin Yaradılması


3 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, məlumat bazasında qeydə alınmış nümunələrin alikvotlarını və törəmələrini yarada bilər. Bu qısa bələdçi, alikvot və ya törəməni yaratmaq üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **NÜMUNƏLƏR**-i seçin. **NÜMUNƏLƏR** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır.

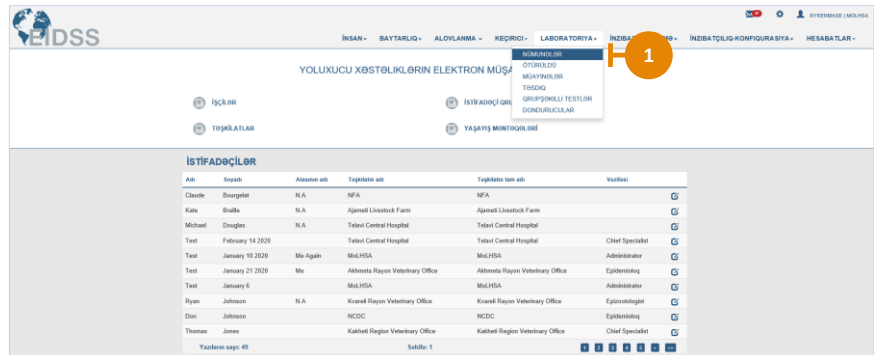

2. Alikvot və ya törəmə yaratmaq istədiyiniz nümunə üçün axtarış parametrlərini daxil edin. **Qeyd:**Lazımi nümunə cədvəldə göründüyü halda, axtarışa ehtiyac yoxdur.

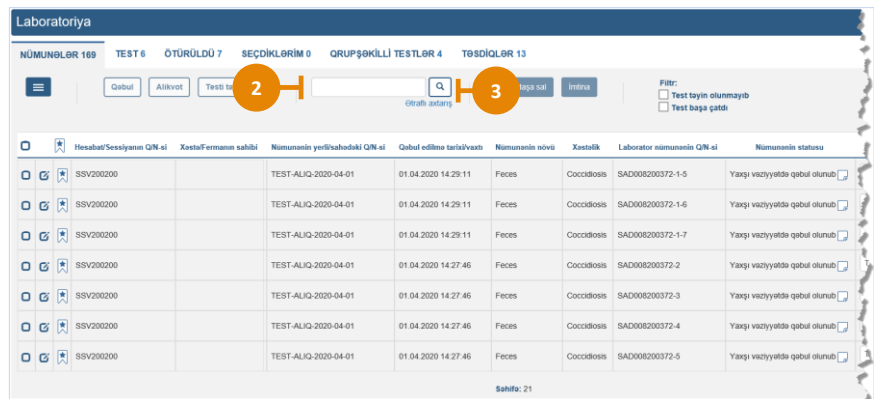

3. **Axtar** ikonuna klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənərək **Axtarış nəticələrini** göstərir.

**Məsləhət 1:** Əgər lazımi nümunə görünürsə, **Ətraflı axtarış** düyməsini klikləyin, mümkün qədər çox məlumat daxil edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.



4. Lazımi nümunənin yanında seçim qutusunu işarələyin. **Qeyd:**Yalnız qeydə alınmış nümunələr üçün alikvotların və törəmələrin yaradılması mümkündür.
5. **Alikvot** üzərinə klikləyin.**Alikvotlar/Törəmələr** pəncərəsi açılır.

## Alikvot və ya Törəmənin Yaradılması

3 səhifədən 2

### 6. Lazımi nümunənin yanında seçim

**Məsləhət 2:** Daxil edilmiş məlumatı silib pəncərəni bağlamaq üçün, **İmtina** düyməsini klikləyin.

### 7. Alikvotu yarat və ya Törəməni yarat radio düyməsini seçin.

### 8. Yeni nümunələrin sayını daxil edin. Qeyd: Əgər bir neçə nümunə seçilibsə, daxil edilmiş say hamısına tətbiq olunacaq.

### 9. Aşağı açılan menyudan Törəmə növü-nü seçin. Qeyd: Əgər Alikvotu yarat seçilibsə, bu menyuyu qeyri-aktiv olacaq.

### 10. OK düyməsini klikləyin. Cədvəl yenilənəcək və hər alikvot və ya törəmə üçün Yeni laborator nümunənin Q/N-si göstəriləcək.

### 11. Yeni nümunəyə aid Saxlanılma yeri ikonuna klikləyin. Saxlanılma

**Məsləhət 3:** Saxlanılma səviyyəsini yığışdırmaq/göstərmək üçün müvafiq **Göstər/Gizlət** ikonuna klikləyin.

### 12. Yeni nümunəni saxlamaq istədiyiniz Qutu-nun üzərinə klikləyin.

M2

## Alikvot və ya Törəmənin Yaradılması

3 səhifədən 3

13. Alikvot və ya törəmənin fiziki yerləşməsini göstərmək üçün Qutu səviyyəsindəki simvolun üzərinə klikləyin. **Qeyd:** Simvollar seçildikdə narıncı rəngə çevrilir; istifadəsi mümkün olmayan yerlər boz rəngdə göstərilir.

14. Lazım olduqda qeyd daxil edə bilərsiniz. **Qeyd:**Hər bir yeni yaradılmış nümunə üçün 11-14 addımları təkrarlayın. **Qeyd:**Alikvot və ya törəmələrin ştrix-kodlarını çap etmək üçün, **Ştrixkodu çap et** seçim qutusunu işarələyin və sonra, açılan **Ştrixkod etiketləri** pəncərəsində **Çap et** üzərinə klikləyin.

**Məsləhət 4:**Alikvot və ya törəməni silmək üçün, müvafiq nümunəyə aid **Sil** ikonuna klikləyin.

15. **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin.Alikvot və ya törəmənin müvəffəqiyyətlə yaradılmasını təsdiqləyən pop-up pəncərəsi ekrana gəlir.

15