


## Soyuducunun Konfigurasiya edilməsi

2 səhifədən 1


Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi nümunələrin saxlanılma yerlərini təyin edə bilər. Bu qısa bələdçi, soyuducunu konfigurasiya etmək üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **SOYUDUCULAR-ı** seçin. **Soyuducuların siyahısı** ekranı açılır.

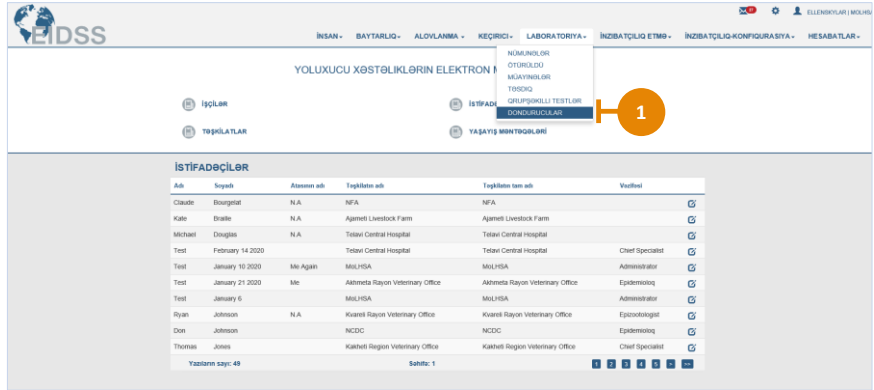

2. Əlavə et üzərinə klikləyin. **Soyuducu [Yeni soyuducu]**, **Soyuduculara dair təfərrüatlar** bölməsində görünür.


**Məsləhət 1:** Mövcud konfigurasiyaya əsasən yeni soyuducu yaratmaq üçün, istədiyiniz **Soyuducunun adı**-na aid **Redaktə et** ikonuna klikləyin, **Soyuducunun surətini çıxar** üzərinə klikləyin, **Soyuducuya dair təfərrüatlar** altında sadalanan səviyyələrin atributlarını yeniləyin və **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin.

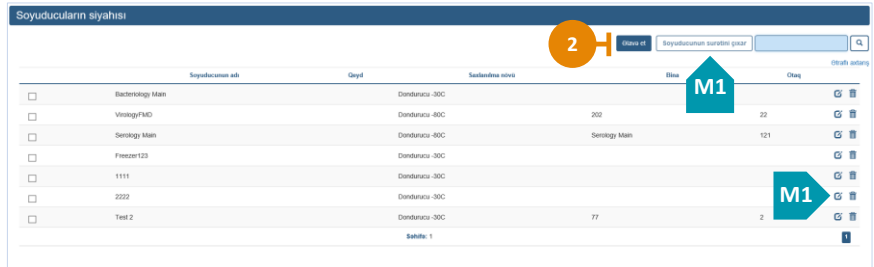

3. **Soyuducunun atributları** bölməsini doldurun. **Qeyd:** Qırmızı ulduzla nişanlanmış sahələr məcburidir.

**Məsləhət 2:** Daxil edilmiş məlumatı yaddaşa salmadan əvvəlki ekrana qayıtmaq üçün, **İmtina** düyməsini klikləyin.

4. Əlavə et üzərinə klikləyin. **Rəf [Yeni rəf]**, **Soyuduculara dair təfərrüatlar** bölməsində görünür və hissələrin atributları bölməsi açılır.

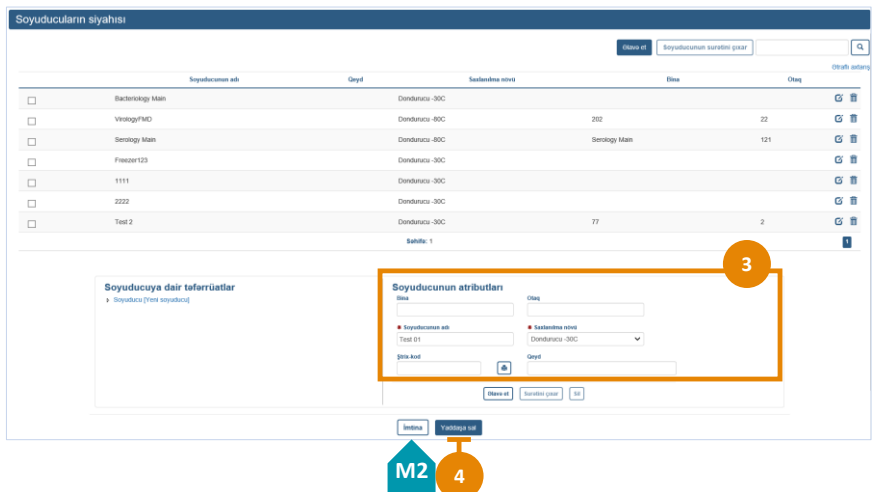

## Soyuducunun Konfigurasiya edilməsi

2 səhifədən 2

5. Soyuducunun hissəsinə dair məlumatı daxil edin.

**Məsləhət 3:** Soyuducunun səviyyələrini genişləndirmək üçün, **Soyuducuya dair təfərrüatlar** bölməsində **Göstər/Gizlət** ikonlarından istifadə edin.

6. Əlavə səviyyələri konfigurasiya etmək lazım olduqda 4-cü və 5-ci addımları təkrarlayın. **Qeyd:** **Qutu** səviyyəsində, **Soyuducuya dair təfərrüatlar** bölməsində nümunənin saxlanılma yerini göstərmək məqsədiylə yeləşməsini seçmək üçün **Qutu [Yeni qutu]** üzərinə klikləyin; seçilmiş yerlər narıncı rəngə çevriləcək və mövcud olmayan yerlər boz rənglə qeyd olunacaq.
7. **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin. Soyuducunun müvəffəqiyyətlə konfigurasiya edilməsini təsdiqləyən pop-up pəncərəsi ekrana gəlir.

Soyuducunun adı	Qeyd	Səviyyələrin siyahısı	Rəng	Otaq
Bacteriology Main		Dondurucu -30C		
Virology/FMD		Dondurucu -80C	212	22
Serology Main		Dondurucu -80C	Serology Main	121
Freezer123		Dondurucu -30C		
1111		Dondurucu -30C		
2222		Dondurucu -30C		
Total 2		Dondurucu -30C	77	2

Səhifə: 1

**Soyuducuya dair təfərrüatlar**

• Soyuducu Test 01  
• Rəng [Yeni rəng]

**Səviyyənin adı**  
[Yeni rəng]

**Səviyyənin rəngi**  
[Yeni rəng]

**Yerləşmə yeri**  
[Yeni yer]

**Qutu**  
[Yeni qutu]

**Qeyd**  
[Yeni qeyd]

**Yeni qutu** **Göstər** **Gizlət**

**Yaddaşa sal**