


Soyuducunun Redaktə edilməsi


2 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi nümunələrin saxlanılma yerlərini dəyişdirə bilər. Bu qısa bələdçi, soyuducunu redaktə etmək üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **SOYUDUCULAR-ı** seçin. **Soyuducuların siyahısı** ekranı açılır.

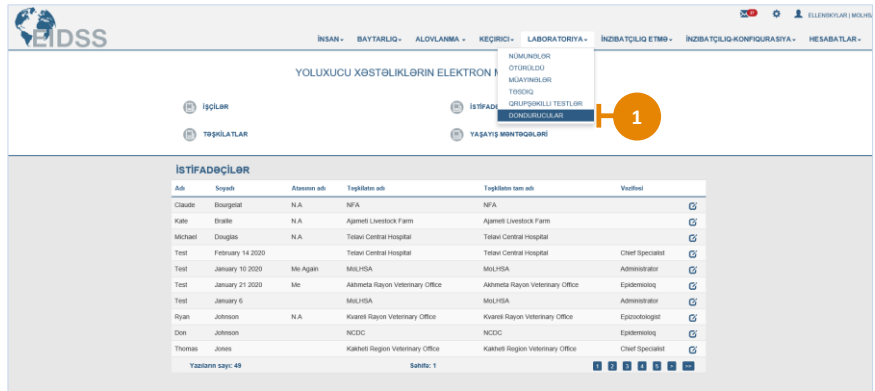


2. Redaktə etmək istədiyiniz soyuducu üçün axtarış parametrini daxil edin. **Qeyd:** Lazımi soyuducu **Soyuducuların siyahısında** göründüyü halda, axtarışa ehtiyac yoxdur.

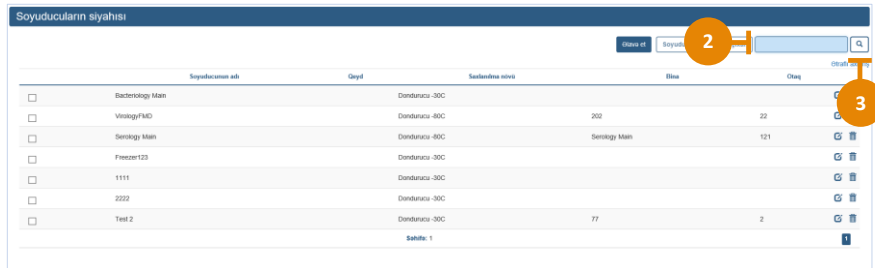

3. **Axtar** ikonuna klikləyin. **Soyuducuların siyahısı** ekranı yenilənərək axtarış nəticələrini göstərir.

Məsləhət 1: Əgər lazımi soyuducu görünmürsə, **Ətraflı axtarış** düyməsini klikləyin, mümkün qədər çox məlumat daxil edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.

4. İstədiyiniz soyuducuya aid **Redaktə et** ikonuna klikləyin. **Soyuducuların siyahısı** ekranı yenilənərək **Soyuducunun atributları** bölməsini və **Soyuducuya aid təfəsilatlar** bölməsində seçilmiş **Soyuducunun adını** göstərir.

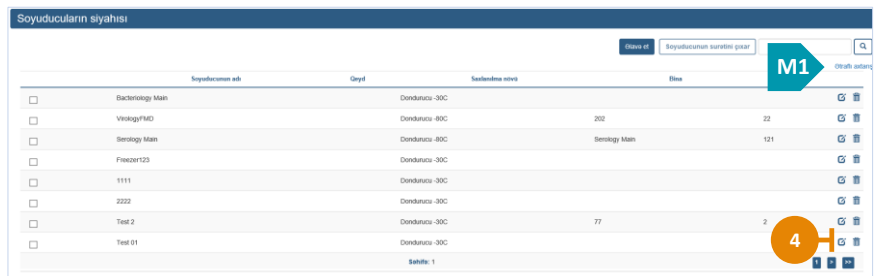

Soyuducunun Redaktə edilməsi

2 səhifədən 2

5. Soyuducunun atributları bölməsinə lazımi dəyişiklikləri edin.
6. Lazım olduqda, soyuducunun hər hissəsinə (**Rəf**, **Torlu məftil rəfi** və **Qutu**) daxil olub dəyişikliklər etmək üçün, **Göstər/Gizlət** ikonundan istifadə edin.

Məsləhət 2: Daxil edilmiş məlumatı yaddaşa salmadan əvvəlki ekrana qayıtmaq üçün, **İmtina** düyməsini klikləyin.

7. **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin. Soyuducu verilənlər bazasında dəyişdirildi.

Soyuducuların siyahısı

İstədiyiniz soyuducunun sürətini gətir

Soyuducunun adı	Geyd	Sərtləndirə növü	Birə	Ölçü
<input type="checkbox"/> Bakterioqiyman		Dəndənə -30C		
<input type="checkbox"/> Virusqiyman		Dəndənə -80C	202	22
<input type="checkbox"/> Seroloji Man		Dəndənə -80C	Seroloji Man	121
<input type="checkbox"/> Filtre123		Dəndənə -30C		
<input type="checkbox"/> 1111		Dəndənə -30C		
<input type="checkbox"/> 2222		Dəndənə -30C		
<input type="checkbox"/> Test 2		Dəndənə -30C	77	2
<input type="checkbox"/> Test 01		Dəndənə -30C		

Səhifə: 1

6 Soyuducuya dair təfərrüatlar

Soyuducunun atributları

5

İmtina Yaddaşa sal

M2

7