

## ნიმუშის მიღება


2 ის გვ. 1

შესაბამისი ნებართვის მქონე დზეის მომხმარებელს შეუძლია მონაცემთა ბაზაში არსებულ ნაკრებს დაამატოს ნიმუშები. ეს სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს ნიმუშის მისაღებად.

1. **დზეის პანელიდან** აირჩიეთ ნიმუშები, **ლაბორატორიის** ჩამოსაშლელი მენიუდან. **ლაბორატორიის** ეკრანი გამოჩნდება ნიმუშების ღია ჩანართით და გამოსახავს ყველა ნიმუშს, მათ შორის მიღებულ ნიმუშებს, რომელთათვისაც ჯერ არ არის დანიშნული ტესტი ან იმ ნიმუშებს, რომლებიც ჯერ არ არის მიღებული (გამოჩნდება ხაზგასმული ყვითლად).



2. მონიშნეთ ყველა იმ ნიმუშის ბოქსი, რომლის მიღებაც გსურთ. **ლაბორატორიის** ეკრანი განახლდება და გააქტიურდება მიღების ღილაკი.

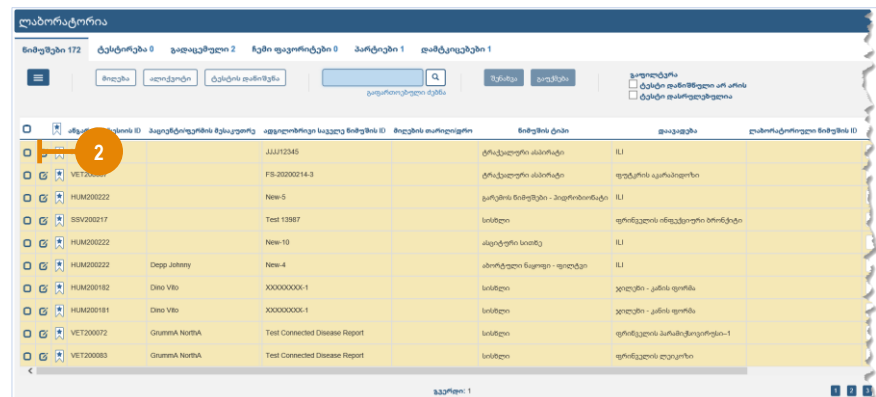

## ნიმუშის მიღება

2 ის გვ. 2

- დააწკაპუნეთ **მიღებაზე** გამოჩნდება დამატებითი ველების შემცველი ფანჯარა.
- ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ **ნიმუშის სტატუსი**.  
**შენიშვნა:** თუკი შერჩეულია მრავლობითი ნიმუში, არჩეული სტატუსი გავრცელდება ყველა მათგანზე.  
**შენიშვნა:** თუკი არჩეულია მიღებულია ცუდ მდგომარეობაში ან უარყოფა, ბადეში შესაბამისი კომენტარის სიმბოლოს გვერდით გამოჩნდება წითელი ვარსკვლავი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს სავალდებულო ველია.
- საჭიროებისამებრ მონიშნეთ ბოქსი- **შტრიხკოდის დაბეჭდვა?** **ლაბორატორიის** ეკრანი განახლდება და გამოსახავს მოდიფიცირებულ ნიმუშს მუქ ფერებში. გააქტიურდება **შენახვის** ლილავი. **შენიშვნა:** თუ ბოქსი მონიშნულია, დააწკაპუნეთ **დაბეჭდვაზე** **შტრიხ კოდის** ეტეკიტების ფანჯარაზე, რომელიც გამოჩნდება შენახვის შემდეგ.
- დააწკაპუნეთ **შენახვაზე** გამოჩნდება ფანჯარა, რომელიც ადასტურებს ნიმუშის წარმატებით მიღებას.

ლაბორატორია

ნიმუშები 172 ტესტირება 0 გადამღებული 1 ჩემი ფაქტორები 0 პარტიკი 1 დამტკიცებული 1

მიღება

გადაღებულია? ☐ შტრიხკოდის დაბეჭდვა?

გადაღებულია? ☐ ტესტირებულია არ არის ☐ ტესტირებულია

გადაღებულია? ☐ ტესტირებულია

ნიმუშის ID	პაციენტის ID	ნიმუშის სახელი	ნიმუშის ტიპი	ნიმუშის სტატუსი	ნიმუშის აღწერა	ნიმუშის მიღების თარიღი
HUM000022	JJ1712345	FS-20200214-3	ტრანსპლანტაციის ასპირატი	IL	ფანჯარის აკრძალვა	
VE7200087	New-6	Test 13967	გარეგანი ნიმუში - პაციენტის ნიმუში	IL	ფანჯარის აკრძალვა	
SSV200217	Test 13967	New-10	სისხლი	ფანჯარის აკრძალვა	ფანჯარის აკრძალვა	
HUM000022	New-4	სისხლი	სისხლი	IL	ფანჯარის აკრძალვა	
HUM000162	Dino Vito	X00000000-1	სისხლი	IL	ფანჯარის აკრძალვა	
HUM000161	Dino Vito	X00000000-1	სისხლი	IL	ფანჯარის აკრძალვა	
VE7200072	Gnuma NorthA	Test Connected Disease Report	სისხლი	ფანჯარის აკრძალვა	ფანჯარის აკრძალვა	
VE7200083	Gnuma NorthA	Test Connected Disease Report	სისხლი	ფანჯარის აკრძალვა	ფანჯარის აკრძალვა	

გვერდი 1

ლაბორატორია

ნიმუშები 172 ტესტირება 0 გადამღებული 2 ჩემი ფაქტორები 0 პარტიკი 1 დამტკიცებული 1

მიღება

გადაღებულია? ☐ შტრიხკოდის დაბეჭდვა?

გადაღებულია? ☐ ტესტირებულია არ არის ☐ ტესტირებულია

გადაღებულია? ☐ ტესტირებულია

ნიმუშის ID	პაციენტის ID	ნიმუშის სახელი	ნიმუშის ტიპი	ნიმუშის სტატუსი	ნიმუშის აღწერა	ნიმუშის მიღების თარიღი
HUM000022	JJ1712345	FS-20200214-3	ტრანსპლანტაციის ასპირატი	IL	ფანჯარის აკრძალვა	09.03.2020 12:18:47
VE7200087	New-6	Test 13967	გარეგანი ნიმუში - პაციენტის ნიმუში	IL	ფანჯარის აკრძალვა	09.03.2020 12:18:47
SSV200217	Test 13967	New-10	სისხლი	ფანჯარის აკრძალვა	ფანჯარის აკრძალვა	
HUM000022	New-4	სისხლი	სისხლი	IL	ფანჯარის აკრძალვა	
HUM000162	Dino Vito	X00000000-1	სისხლი	IL	ფანჯარის აკრძალვა	
HUM000161	Dino Vito	X00000000-1	სისხლი	IL	ფანჯარის აკრძალვა	
VE7200072	Gnuma NorthA	Test Connected Disease Report	სისხლი	ფანჯარის აკრძალვა	ფანჯარის აკრძალვა	
VE7200083	Gnuma NorthA	Test Connected Disease Report	სისხლი	ფანჯარის აკრძალვა	ფანჯარის აკრძალვა	

გვერდი 1