
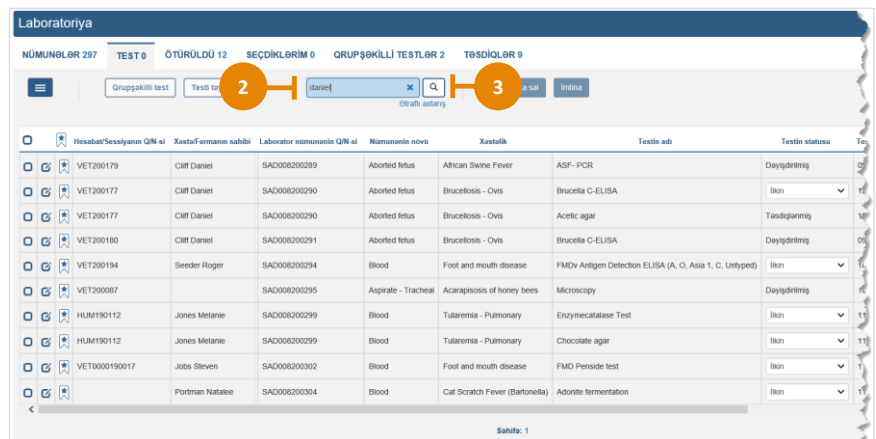


## Test üzrə Yazının Silinməsi


2 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, yazıları verilənlər bazasından silə bilər. Bu qısa bələdçi, test üzrə yazını silmək üçün addımları təqdim edir.

- YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **TESTLƏR**-i seçin. **Testlər** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır.
- Silmək istədiyiniz testə aid nümunə üçün axtarış parametrini daxil edin. **Qeyd:**Lazımi nümunə cədvəldə göründüyü halda, axtarışa ehtiyac yoxdur.
- Axtar** ikonuna klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənərək **Axtarış nəticələrini** göstərir.
- Hər bir istədiyiniz nümunənin yanında seçim qutusunu işarələyin. **Qeyd:**Yalnız **Test adı** və **Test statusu** «**Hazırlıq**» və ya «**Prosesdədir**» olan qəydə alınmış nümunələr silinə bilər.
- Nümunələr menyusunu** ikonuna klikləyin. **Nümunələr menyusunu** ekrana gəlir.

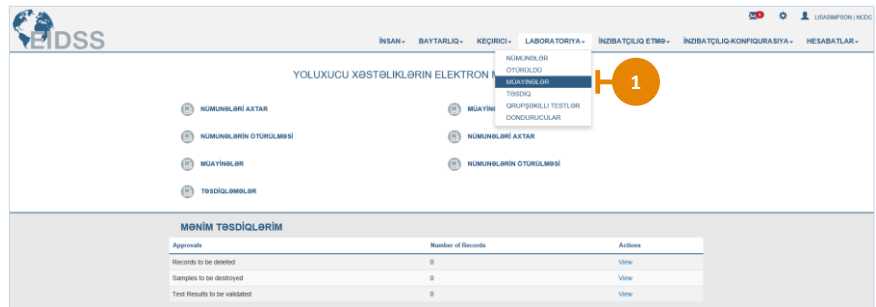


**Məsləhət:** Əgər lazımi nümunə görünmürsə, **Ətraflı axtarış** düyməsini klikləyin, mümkün qədər çox məlumat daxil edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.

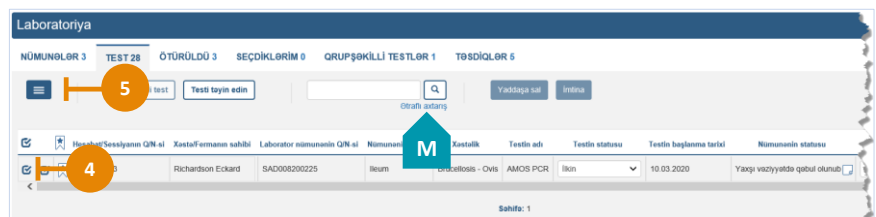

## Test üzrə Yazının Silinməsi

2 səhifədən 2

- Laborator yazının silinməsi > Testi sil** üzərinə klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənir, dəyişdirilmiş nümunə qalın şriftlə göstərilir və **Yaddaşa sal** düyməsi aktivləşdirilir.

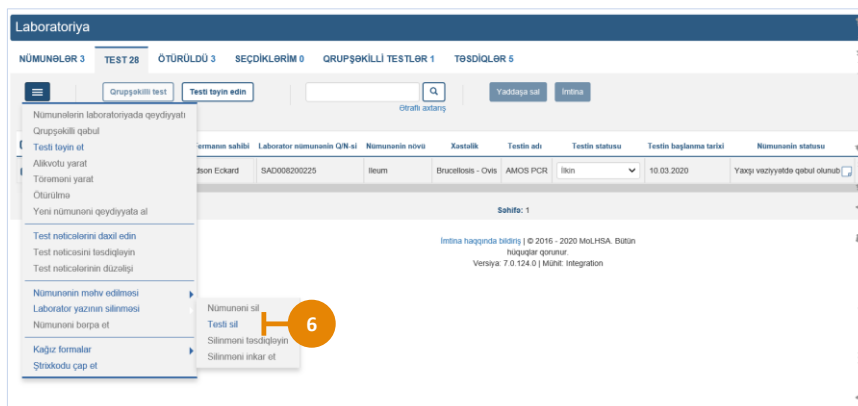

- Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin. Test **TƏSDİQLƏR** tab-vərəqəsinə keçirildi.

