

ტესტი-ტესტის შედეგების მატრიცის კონფიგურაცია


2 ის გვ. 1

შესაბამისი ნებართვის მქონე EIDSS-ის მომხმარებელს შეუძლია ტესტის შედეგების ჩამონათვალის მართვა როგორც სპეციფიცირებულია ტესტის დასახელების მიერ მონაცემთა ბაზაში. სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს ტესტი-ტესტის შედეგების მატრიცის კონფიგურაციისათვის.

1. **EIDSS-დან აირჩიეთ ტესტი-ტესტის შედეგის მატრიცა კონფიგურაციების ჩამოსაშლელი მენიუდან. ტესტი-ტესტის შედეგების მატრიცის ეკრანი გამოჩნდება.**



2. **შეარჩიეთ რადიო ლილავი რომელიც შეესაბამება სასურველი ტესტის შედეგის ტიპს.**
3. **ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ ტესტის დასახელება. ყველა არსებული ტესტის შედეგები გამოჩნდება ბადეში.**

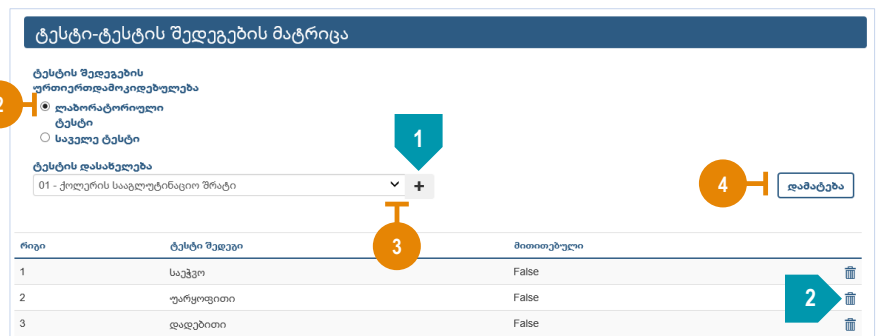

რჩევა 1: ახალი ოპციის დასამატებლად, დააწკაპუნეთ დამატება სიმბოლოზე, შეავსეთ ფანჯარა რომელიც გამოჩნდება და დააწკაპუნეთ გადაცემა.

რჩევა 2: რიგის წასაშლელად დააწკაპუნეთ შესაბამის წაშლა სიმბოლოზე და დააწკაპუნეთ დიახ დიალოგურ ფანჯარაზე რომელიც გამოჩნდება.

4. **დააწკაპუნეთ დამატება. ტესტი-ტესტის შედეგების მატრიცის ფანჯარა გამოჩნდება.**

ტესტი-ტესტის შედეგების მატრიცის კონფიგურაცია

2 ის გვ. 2

5. ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ **ტესტის შედეგი**.

რჩევა 3: იმისათვის რომ აღნიშნოთ **ტესტის შედეგი** რომელიც მიუთითებს დაავადების გამოვლენას, მონიშნეთ **მიუთითებული ბოქსი**; **მიუთითებული ბოქსის** მონიშვნა შესაძლებელია მრავალი ტესტის შედეგისათვის.

რჩევა 4: იმისათვის რომ წაშალოთ შეყვანილი ინფორმაცია და დახუროთ ფანჯარა დააწკაპუნეთ **გაუქმება**.

6. დააწკაპუნეთ **გადაცემა**. გამოჩნდება ფანჯარა რომელიც ადასტურებს მატრიცის წარმატებით კონფიგურაციას.