


Testin Təyin edilməsi


2 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, məlumat bazasında qəbul olunmuş nümunələrə testləri təyin edə bilər. Bu qısa bələdçi, testi təyin etmək üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **NÜMUNƏLƏR**-i seçin. **NÜMUNƏLƏR** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır.

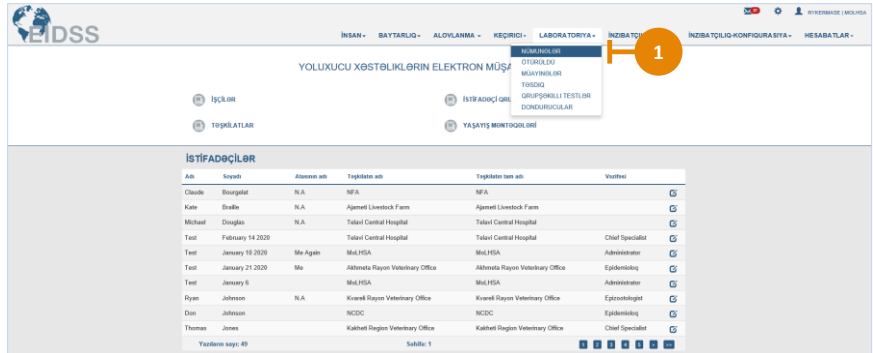


2. Testi təyin etmək istədiyiniz nümunə üçün axtarış parametrlərini daxil edin. **Qeyd:**Lazımi nümunə cədvəldə görüldüyü halda, axtarışa ehtiyac yoxdur.
3. **Axtar** ikonuna klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənərək **Axtarış nəticələrini** göstərir.

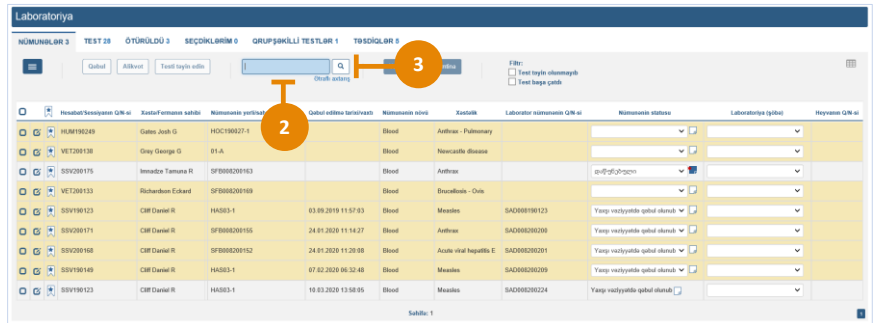

Məsləhət 1: Əgər lazımi nümunə görünmürsə, **Ətraflı axtarış** düyməsini klikləyin, mümkün qədər çox məlumat daxil edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.

4. Testi təyin etmək istədiyiniz qəbul olunmuş nümunəyə aid seçim qutusunu işarələyin.
5. **Testi təyin et** üzərinə klikləyin. **Testi təyin et** pəncərəsi ekrana gəlir.

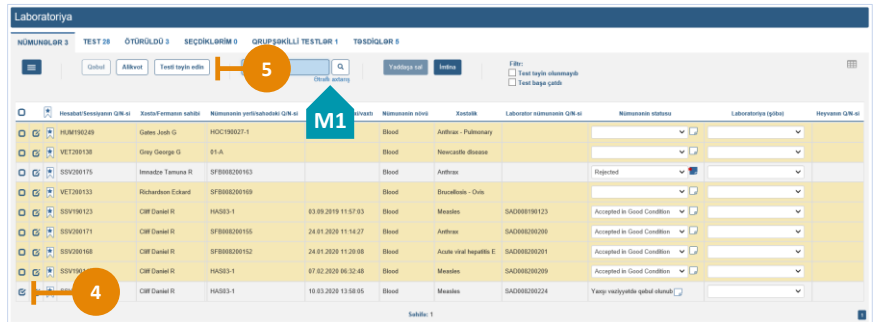

Testin Təyin edilməsi

2 səhifədən 2

6. Aşağı açılan menyudan **Testin adı**-ni seçin. **Qeyd:**Əgər aşağı açılan menyuları testlərin adları və xəstəlik ilə əlaqədar kateqoriyalar üzrə filtrdən keçirmək istəmirsinizsə, **Xəstəlik üzrə testin adını filtrdən keçir** qutusunda işarəni çıxarın.

7. **Əlavə et** ikonuna klikləyin. **Qeyd:**Nümunəyə əlavə testləri təyin etmək üçün 6-cı və 7-ci addımları təkrarlayın.

Məsləhət 2:Daxil edilmiş məlumatı silib pəncərəni bağlamaq üçün, **İmtina** düyməsini klikləyin.

8. **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin.Nümunəyə test təyin edildi, və nümunə artıq **TESTLƏR** tab-vərəqəsində görünür.

9. **TESTLƏR** üzərinə klikləyin.Açılan **TESTLƏR** tab-vərəqəsində dəyişdirilmiş nümunə qalın şriftlə göstərilmişdir və **Yaddaşa sal** düyməsi aktivləşdirilmişdir.

NÜMUNELƏR 3	TEST 0	QOYULAN 0	GRUP PAKETLİ TESTLƏR 1	TƏSDİQLƏR 5
H00190245	Gates Josh G	H0C19027-1	Blood	Antibody - Pulmonary
VE1209138	Guy George G	S1-A	Blood	Newcastle disease
SV0209175	Imwade Tamara R	SFB00209163	Blood	Antibody
VE1209133	Richardson Eckard	SFB00209169	Blood	Encephalitis - Otitis
SV0198123	Chf David R	HA023-1	03.03.2020 11:57:03	Blood
SV0209171	Chf David R	SFB00209155	24.01.2020 11:14:27	Blood
SV0209168	Chf David R	SFB00209152	24.01.2020 11:29:08	Blood
SV0198149	Chf David R	HA023-1	07.02.2020 05:32:48	Blood

10. **Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin.Testin müvəffəqiyyətlə təyin edilməsini təsdiqləyən pop-up pəncərə ekrana gəlir.

NÜMUNELƏR 3	TEST 0	QOYULAN 0	GRUP PAKETLİ TESTLƏR 1	TƏSDİQLƏR 5
SV0198123	Chf David R	SAD00209224	Blood	Measles
SV0198123	Chf David R	SAD00209224	Blood	Measles
VE1209133	Richardson Eckard	SAD00209225	Blood	Encephalitis - Otitis