


## Nümunənin Ötürülməsi


2 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, məlumat bazasında qəbul olunmuş nümunələri ötürə bilər. Bu qısa bələdçi, nümunəni ötürmək üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **NÜMUNƏLƏR**-i seçin. **NÜMUNƏLƏR** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır.

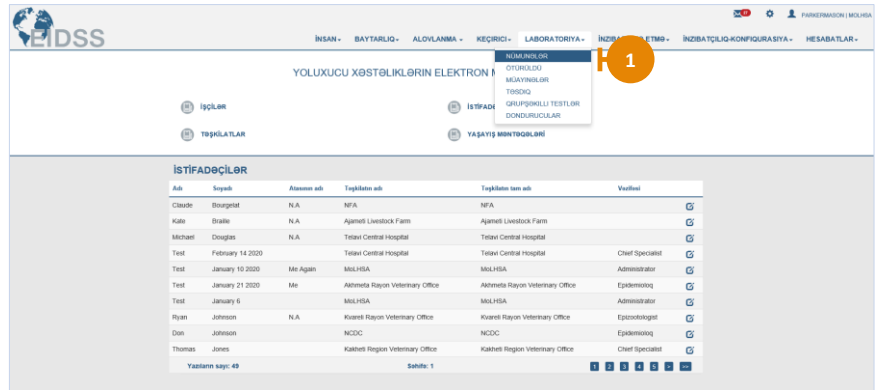

2. Ötürmək istədiyiniz nümunə üçün axtarış parametrini daxil edin. Qeyd:Lazımi nümunə cədvəldə göründüyü halda, axtarışa ehtiyac yoxdur.

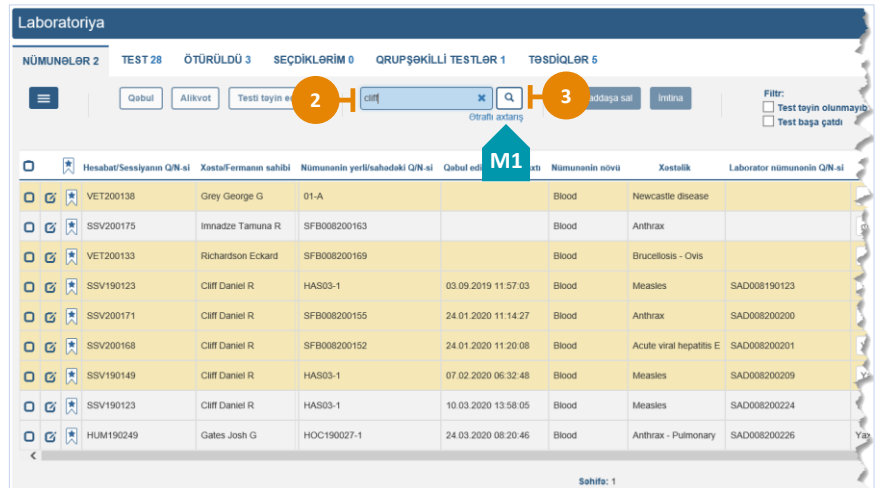


3. **Axtar** ikonuna klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənərək **Axtarış nəticələrini** göstərir.

**Məsləhət 1:** Əgər lazımi nümunə görünmürsə, **Ətraflı axtarış** düyməsini klikləyin, mümkün qədər çox məlumat daxil edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.

4. Lazımi nümunənin yanında seçim qutusunu işarələyin.

5. **Nümunələr menyusunu** ikonuna klikləyin. **Nümunələr menyusunu** ekrana gəlir.

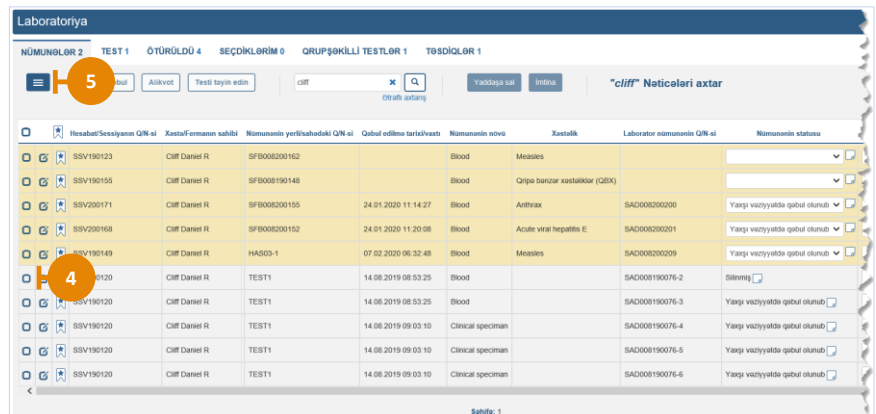

## Nümunənin Ötürülməsi

2 səhifədən 2

6. **Ötürülmə** üzərinə klikləyin. **Nümunəni ötür** pəncərəsi ekrana gəlir.

The screenshot shows the 'Laboratoriya' module interface. On the left, there is a sidebar with various options. A red circle with the number 6 highlights the 'Ötürülmə' (Transfer) option. The main area displays a table of samples with columns for 'Nümunənin yerləşməsi QIN-si', 'Qəbul edilmə tarixi', 'Nümunənin növü', 'Xəstəlik', 'Laborator nümunənin QIN-si', and 'Nümunənin statusu'. The table contains several rows of data.

7. **Nümunəni ötür** pəncərəsini doldurun. **Qeyd:** Qırmızı ulduzla nişənlənmiş sahələr məcburidir. **Qeyd:** Ştrix-kodları çap etmək üçün, **Ştrixkodu çap et** seçim qutusunu işarələyin və sonra, açılan **Ştrixkod etiketləri** pəncərəsində **Çap et** üzərinə klikləyin.

**Məsləhət 2:** İstənilən tarixə keçmək üçün, **Təqvim** ikonuna klikləyin və sonra, təqvimin yuxarısında yerləşən pəncərədə **Ayı seç > İli Seç > Onilliyi seç** üzərinə klikləyin.

**Məsləhət 3:** Daxil edilmiş məlumatı silib pəncərəni bağlamaq üçün, **İmtina** düyməsini klikləyin.

8. **Ötürülmə** üzərinə klikləyin. Nümunə ötürüldü və nümunə üzrə yazı **ÖTÜRÜLƏNLƏR** tab-vərəqəsində açılır.

The screenshot shows the 'Nümunəni ötür' (Transfer Sample) form. It contains several input fields and buttons. A red circle with the number 7 highlights the 'Ötürülmə' (Transfer) button. A blue circle with the number 8 highlights the 'Çap et' (Print) button. A blue circle with the number 9 highlights the 'İmtina' (Cancel) button. The form includes fields for 'Ötürülmənin səbəbi', 'Tələb olunan test', 'Hara ötürüldü', 'Göndərilmə tarixi', 'Haradan ötürüldü', and 'Göndərən'.