


Nümunənin Daxil edilməsi

2 səhifədən 1


Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi verilənlər bazasında nümunələri yarada bilər. Bu qısa bələdçi, nümunəni daxil etmək üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **NÜMUNƏLƏR**-i seçin. **NÜMUNƏLƏR** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır.

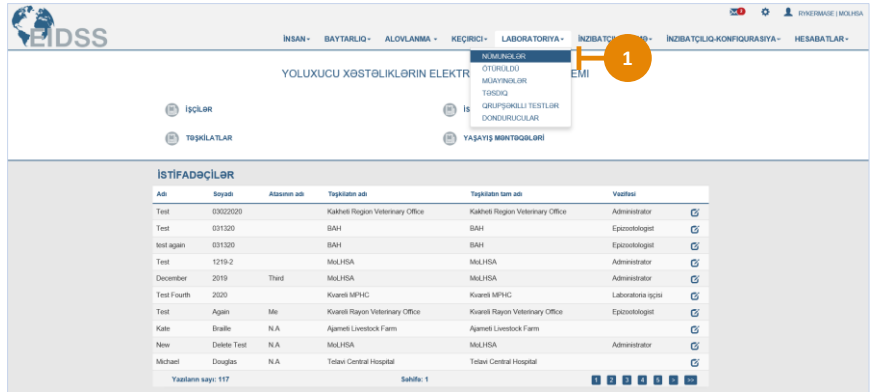


2. **Nümunələr menyusu** ikonuna klikləyin. **Nümunələr menyusu** ekrana gəlir.

3. **Yeni nümunəni qeydiyyatı al** üzərinə klikləyin. **Yeni nümunəni qeydiyyatı al** pəncərəsi açılır.

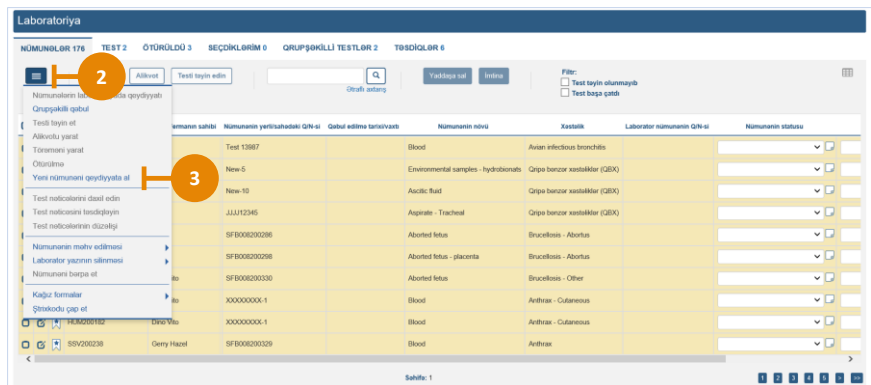

4. **Yeni nümunəni qeydiyyatı al** pəncərəsini doldurun. **Qeyd:** Qırmızı ulduzla nişanlanmış sahələr məcburidir. **Qeyd:** Əgər **Hesabatın/Sessiyanın Q/N-si** daxil edilibsə, **Xəstə/Ferma sahibi** və **Xəstəlik** sahələri avtomatik olaraq doldurulur.

Məsləhət: Gər **Xəstə/Fermanın sahibi** sahəsi avtomatik olaraq doldurulmursa, həmin sahəni **Axtar** və ya **Əlavə et** ikonlarından istifadə edərək doldurun.

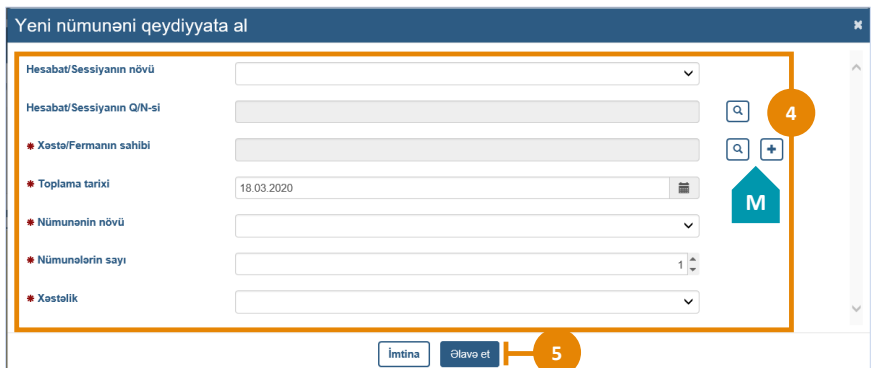

5. **Əlavə et** üzərinə klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənir, **NÜMUNƏLƏR** cədvəlində yeni nümunə qalın şriftlə göstərilir, və təsdiqləyici popup pəncərəsi ekrana gəlir.

Nümunənin Daxil edilməsi

2 səhifədən 2

6. **OK düyməsini klikləyin.** Qeyd: Digər nümunələri əlavə etmək üçün 4-6 addımlarını təkrarlayın.

Yeni nümunəni qeydiyyat al

Əməliyyatın uğurla başa çatması haqqında YXEMS mesajı

Yeni nümunə(lər) qeydə alındı. Yeni nümunə üçün məlumatları daxil edə bilərsiniz.

6 OK

Hesabat/Sessiyanın növü

Hesabat/Sessiyanın Q/N-si

* Xəstə/Fermanın sahibi

* Toplama tarixi

* Nümunənin növü

* Nümunələrin sayı

* Xəstəlik

İmtina Əlavə et

7. **İmtina düyməsini klikləyin.** Yeni nümunəni qeydiyyat al pəncərəsi bağlanır.

Yeni nümunəni qeydiyyat al

Hesabat/Sessiyanın növü

Hesabat/Sessiyanın Q/N-si

* Xəstə/Fermanın sahibi

* Toplama tarixi

* Nümunənin növü

* Nümunələrin sayı

* Xəstəlik

7 İmtina Əlavə et

8. Dəqiqliyi yoxlamaq üçün məlumatları nəzərdən keçirin.

9. **Yaddaşa sal düyməsini** klikləyin. Nümunənin müvəffəqiyyətlə daxil edilməsini təsdiqləyən pop-up pəncərə ekrana gəlir.

Laboratoriya

NÜMUNƏLƏR 176TEST 2ÖTÜRÜLDÜ 3SEÇİMLƏRİM 6GRUPLAŞILMIŞ TESTLƏR 2TƏSİRLƏR 6

Getul

Altıvöl

Testi təyin edin

Q

Qrafik çıxart

Yaddaşa sal

9

Filter:

☐ Test təyin olunmayıb

☐ Test başa çatıb

Hesabat/Sessiyanın Q/N-si	Xəstə/Fermanın sahibi	Nümunənin parafizasiya Q/N-si	Qəbul edilmə tarixi/vaxtı	Nümunənin növü	Xəstəlik	Laborator nümunənin Q/N-si	Nümunənin statusu
<div><div></div><div></div></div> Smith			18.03.2020 15:11:19	Abdominal cavity fluid	I-6 Children Mortality		Accepted in Good Condition
<div><div></div><div></div></div> SDV200217	Test 13967			Blood	Avian infectious bronchitis		
<div><div></div><div></div></div> HUNG200222	Now-5			Environmental samples - hydrocarbon	Gripe bənzər xəstəliklər (GBX)		
<div><div></div><div></div></div> HUNG200222	Now-10			Acidic fluid	Gripe bənzər xəstəliklər (GBX)		
<div><div></div><div></div></div> HUNG200222	JJJ172345			Aspirate - Tracheal	Gripe bənzər xəstəliklər (GBX)		
<div><div></div><div></div></div> SDV200236	SF8000000296			Aborted fetus	Brucellosis - Abortus		
<div><div></div><div></div></div> SDV200237	SF8000000296			Aborted fetus - placenta	Brucellosis - Abortus		
<div><div></div><div></div></div> SDV200238	Dino Vito	SF8000000330		Aborted fetus	Brucellosis - Other		
<div><div></div><div></div></div> HUNG200181	Dino Vito	XXXXXXX-1		Blood	Anthrax - Cutaneous		
<div><div></div><div></div></div> HUNG200182	Dino Vito	XXXXXXX-1		Blood	Anthrax - Cutaneous		

Səhifə: 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10