


Nümunənin Qəbul edilməsi


2 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi, məlumat bazasında nümunələri toplamaya dair məlumatlara əlavə edə bilər. Bu qısa bələdçi, nümunəni qəbul etmək üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **NÜMUNƏLƏR**-i seçin. **NÜMUNƏLƏR** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır, ekranda qəbul olunmamış (sarı rənglə ayrılmış) ya da qəbul olunub lakin test təyin olunmamış nümunələr görünür.

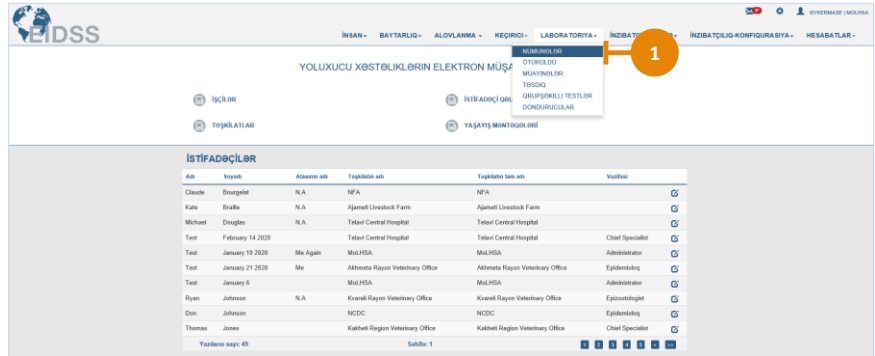

2. Hər bir qəbul etmək istədiyiniz nümunəyə aid seçim qutusunu işarələyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənir və **Qəbul** düyməsi aktivləşir.

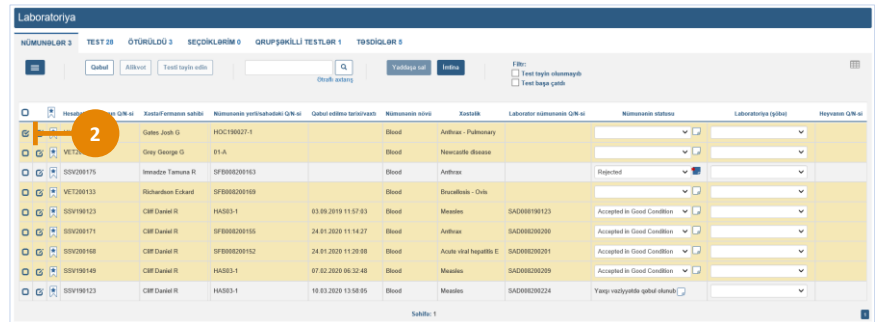

Nümunənin Qəbul edilməsi

2 səhifədən 2

- Qəbul** üzərinə klikləyin. Əlavə sahələri daxil edən pop-up pəncərəsi açılır.
- Lazım olduqda **Ştrixkodu çap et?** seçim qutusunu işarələyin.
Laboratoriya ekranı yenilənir, dəyişdirilmiş nümunə qalın şriftlə göstərilir və **Yaddaşa sal** düyməsi aktivləşdirilir. **Qeyd:** Əgər qutu işarələnibsə, yaddaşa salandan sonra ekrana gələn **Ştrixkod etiketləri** pəncərəsində **Çap et** düyməsini klikləyin.
- Aşağı açılan menyudan **Nümunənin statusu**-nu seçin. **Qeyd:** Əgər bir neçə nümunə seçilibsə, seçilmiş status hamısına tətbiq olunacaq. **Qeyd:** Əgər **Pis vəziyyətdə qəbul olunub** və ya **Rədd et** seçilibsə, cədvəldə müvafiq **Qeyd** ikonunun yanında məcburi sahə olduğunu göstərən qırmızı ulduz işarəsi görünəcək.
- Yaddaşa sal** düyməsini klikləyin. Nümunənin müvəffəqiyyətlə qəbul edilməsini təsdiqləyən pop-up pəncərə ekrana gəlir.

