

ტესტის შედეგის შესწორება


2 ის გვ. 1

შესაბამისი ნებართვის მქონე დზეის მომხმარებელს შეუძლია მონაცემთა ბაზაში დამტკიცებული ტესტის შედეგების მოდიფიცირება. ეს სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს ტესტის შედეგის შესასწორებლად.

1. **დზეის პანელიდან** აირჩიეთ **ტესტირება**, **ლაბორატორიის** ჩამოსაშლელი მენიუდან. **ლაბორატორიის** ეკრანი გამოჩნდება **ტესტირების** ღია ჩანართით.




2. შეიყვანეთ იმ ნიმუშის ძებნის პარამეტრი, რომლის ტესტის შედეგის შესწორებაც გსურთ. **შენიშვნა:** თუკი სასურველი ტესტი გამოჩნდება ბადეში, ძებნა აღარ გახდება საჭირო.

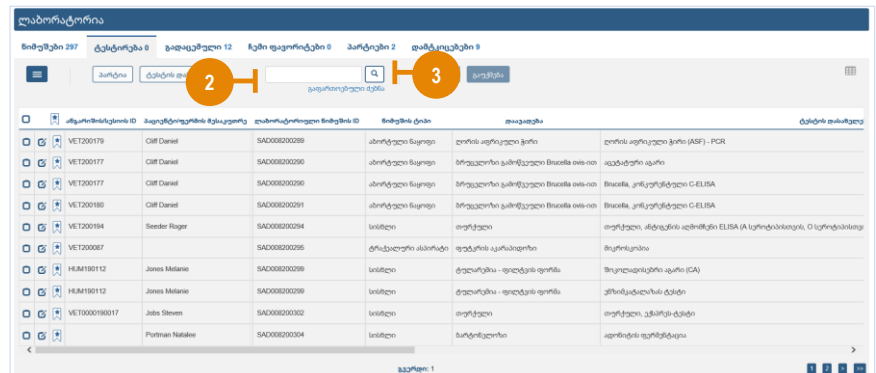

3. დააწკაპუნეთ ძებნის სიმბოლოზე. **ლაბორატორიის** ეკრანი განახლდება და გამოსახავს ძებნის შედეგებს.

რჩევა 1: თუკი სასურველი ნიმუში არ ჩანს, დააწკაპუნეთ გაფართოებულ ძებნაზე, შეიყვანეთ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია და დააწკაპუნეთ ძებნაზე.

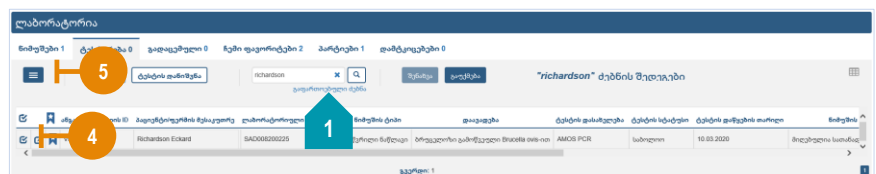


4. მონიშნეთ სასურველი ნიმუშის ბოქსი. **შენიშვნა:** თითო ჯერზე მხოლოდ ერთი ტესტის შედეგის შესწორებაა შესაძლებელი.
5. დააწკაპუნეთ ნიმუშების მენიუს სიმბოლოზე. ნიმუშების მენიუ გამოჩნდება.

ტესტის შედეგის შესწორება

2 ის გვ. 2


6. დააწკაპუნეთ ტესტის შედეგის შესწორებაზე. ტესტის შედეგის შესწორების ფანჯარა გამოჩნდება.

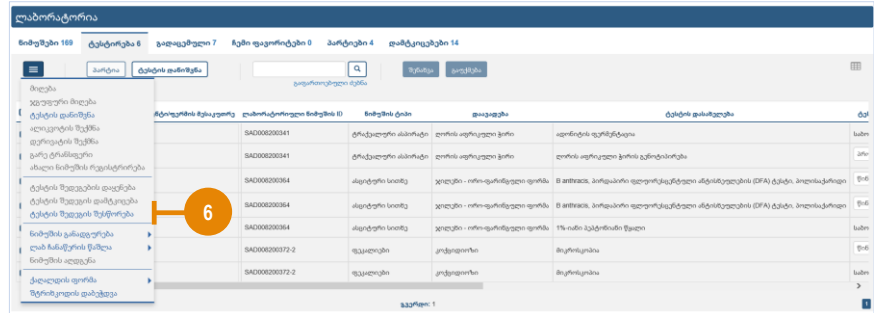

7. ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ შეცვლილი ტესტის შედეგი.

8. შეიყვანეთ შესწორების მიზეზი.

რჩევა 2: იმისათვის, რომ დახურვით ფანჯარა და წაშლით შეყვანილი ინფორმაცია, დააწკაპუნეთ გაუქმებაზე.

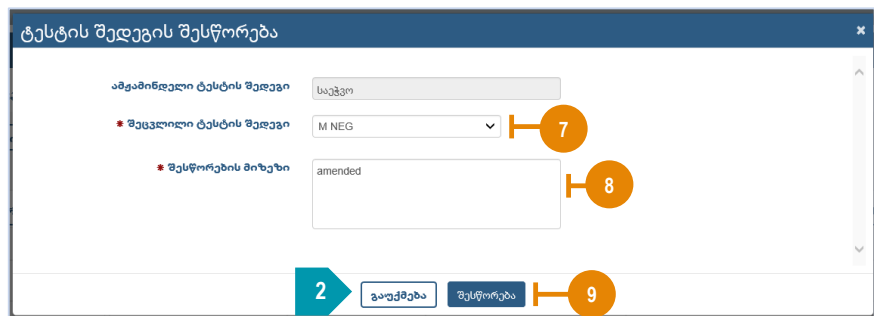

9. დააწკაპუნეთ შესწორებაზე. ლაბორატორიის ეკრანი განახლდება და გამოსახავს მოდიფიცირებულ ნიმუშს მუქ ფერებში. გააქტიურდება შენახვის ღილაკი.

10. დააწკაპუნეთ შენახვაზე. გამოჩნდება ფანჯარა, რომელიც ადასტურებს ტესტის შედეგის წარმატებით შესწორებას.

