


Ştrixkodların Çap edilməsi


2 səhifədən 1

Müvafiq icazələri olan YXEMS istifadəçisi nümunələr üçün ştrixkodları yarada bilər. Bu qısa bələdçi, ştrixkodları çap etmək üçün addımları təqdim edir.

1. **YXEMS idarə lövhəsində**, aşağı açılan **LABORATORİYA** menyusundan **NÜMUNƏLƏR**-i seçin. **NÜMUNƏLƏR** tab-vərəqəsini göstərən **Laboratoriya** ekranı açılır.

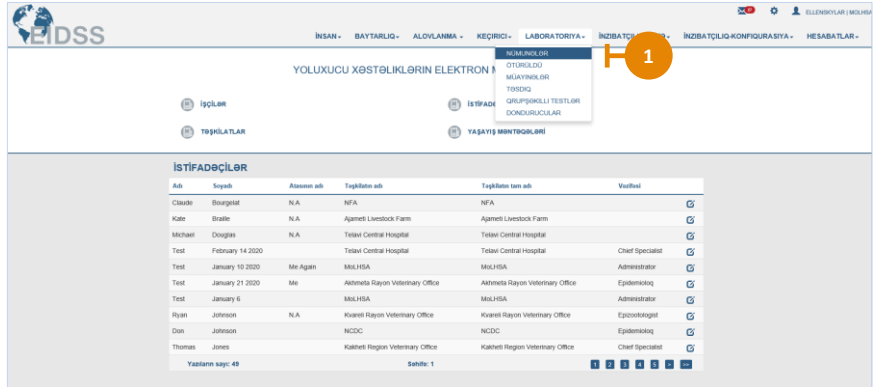


2. Ştrixkod çap etmək istədiyiniz nümunə üçün axtarış parametrlərini daxil edin. **Qeyd:** Lazımi nümunə cədvəldə görüldüyü halda, axtarışa ehtiyac yoxdur.

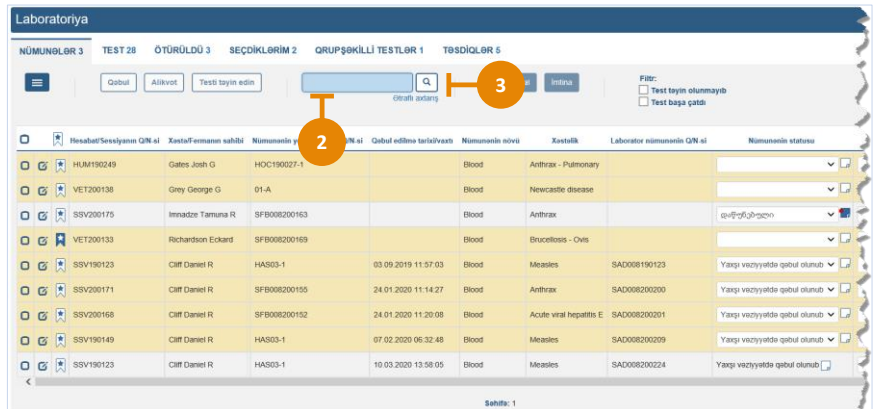

3. **Axtar** ikonuna klikləyin. **Laboratoriya** ekranı yenilənərək **Axtarış nəticələrini** göstərir.

Məsləhət: Əgər lazımi nümunə görünmürsə, **Ətraflı axtarış** düyməsini klikləyin, mümkün qədər çox məlumat daxil edin, və **Axtar** düyməsini klikləyin.

4. Hər bir lazımi nümunənin yanında seçim qutusunu işarələyin. **Qeyd:** Ştrixkodlar yalnız qəbul olunmuş **Laborator nümunənin Q/N-si** olan nümunələr üçün mümkündür.

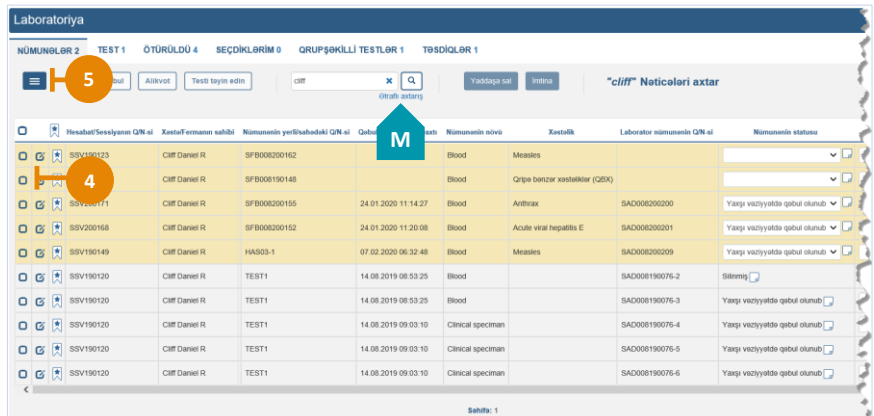

5. **Nümunələr menyusu** ikonuna klikləyin. **Nümunələr menyusu** ekrana gəlir.

Ştrixkodların Çap edilməsi

2 səhifədən 2

6. **Ştrixkodu çap et** üzərinə klikləyin. **Ştrixkod etiketləri** pəncərəsi ekrana gəlir. Qeyd: Hər ştrixkod **Xəstənin/Ferma sahibinin** adını, **Laborator nümunənin Q/N-sini**, və etiketin çap edildiyi tarixi daxil edir.

Laboratoriya

TEST 1 ÖTÜRÜLÜ 4 SEÇİKLƏRİM 0 GRUPOKILLI TESTLƏR 1 TƏSDİQLƏR 1

Qəbul Alkəvat Testi təyin edin cliff Qirah anıq Yaxşıya sal İmtina "cliff" Noticələri axtar

Nümunənin laboratoriyada qeydiyyatı

Qrupşəkilli qəbul

Testi təyin et

Alkəvatı yarat

Tərtibləni yarat

Ötürülmə

Yeni nümunəni qeydiyyatla al

Test nəticələrini daxil edin

Test nəticələrini təsdiqləyin

Test nəticələrini düzəlişi

Nümunənin məxfi edilməsi

Laborator yazının silinməsi

Nümunəni bərpa et

Kağız formalar

Ştrixkodu çap et

SSV190120 Cliff Daniel R TEST1 14.08.2019 09:03:10 Clinical specimen SADO08190076-6 Yangı vəziyyətində qəbul olunub

Səhifə: 1

7. **Çap et** üzərinə klikləyin. Kompüterin **Çap** pəncərəsi ekrana gəlir.
8. Çap göstərişlərinə riayət edin. Nümunə üçün ştrixkodlar çap olundu.

Ştrixkod etiketləri

Cliff Daniel R

SADO08200209 03.23.2020

İmtina Çap et