


შტრიხ კოდების დაბეჭდვა


2 ის გვ. 1

შესაბამისი ნებართვის მქონე დზის მომხმარებელს შეუძლია ნიმუშების შტრიხ კოდების შექმნა. ეს სწრაფი რეკომენდაცია წარმოგვიდგენს საფეხურებს შტრიხ კოდების დასაბეჭდად.

1. **დზის პანელიდან** აირჩიეთ **ნიმუშები, ლაბორატორიის** ჩამოსაშლელი მენიუდან. **ლაბორატორიის** ეკრანი გამოჩნდება ნიმუშების ღია ჩანართით.

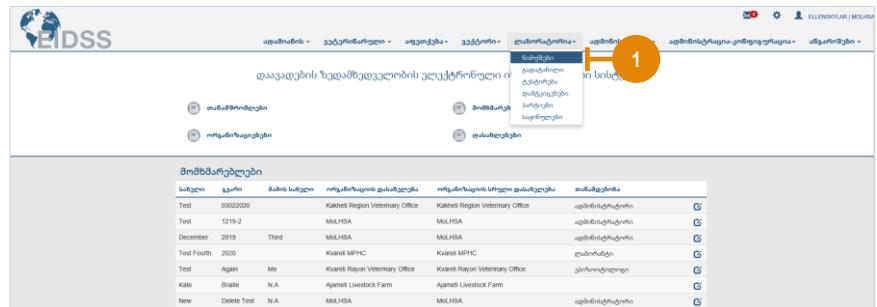


2. შეიყვანეთ იმ ნიმუშის ძებნის პარამეტრი, რომლისთვისაც გასურთ შტრიხკოდების დაბეჭდვა. **შენიშვნა:** თუკი სასურველი ნიმუშები გამოჩნდება ზადეში, ძებნა აღარ გახდება საჭირო.

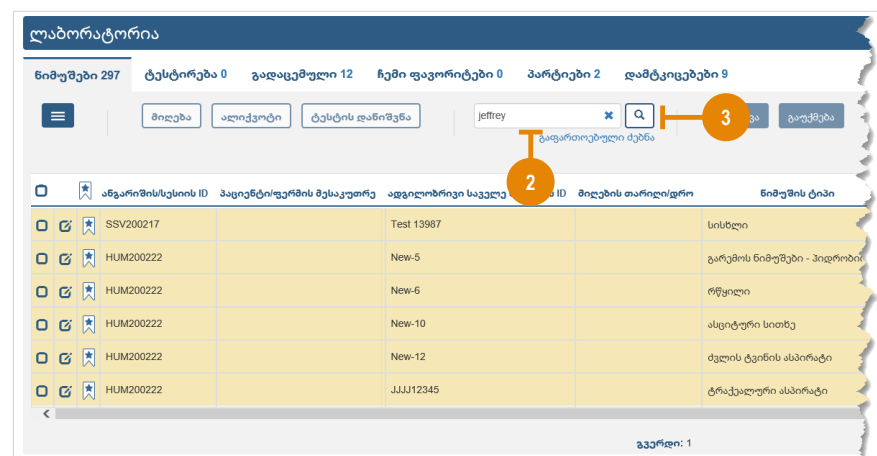

3. დააწკაპუნეთ ძებნის სიმბოლოზე. **ლაბორატორიის** ეკრანი განახლდება და გამოსახავს ძებნის შედეგებს.

რჩევა: თუკი სასურველი ნიმუში არ ჩანს, დააწკაპუნეთ გაფართოებულ ძებნაზე, შეიყვანეთ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია და დააწკაპუნეთ ძებნაზე.

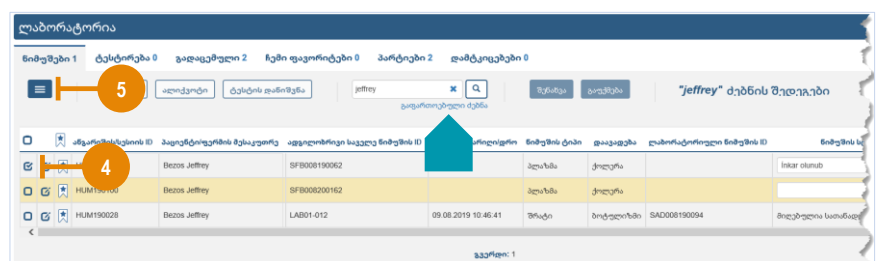


4. მონიშნეთ ყველა სასურველი ნიმუშის ბოქსი. **შენიშვნა:** შტრიხკოდების დაბეჭდვა შესაძლებელია მხოლოდ **ლაბ ნიმუშის ID** ის მქონე მიღებული ნიმუშებისათვის.
5. დააწკაპუნეთ ნიმუშების მენიუს სიმბოლოზე. ნიმუშების მენიუ გამოჩნდება.

შტრის კოდების დაბეჭდვა

2 ის გვ. 2

- დააწკაპუნეთ შტრის კოდების დაბეჭდვაზე. შტრის კოდების ეტიკეტების ფანჯარა გამოჩნდება.
შენიშვნა: თითოეული შტრის კოდი მოიცავს პაციენტის/ფერმის მესაკუთრის სახელს, ლაბ ნიმუშის ID-ის და ეტიკეტის დაბეჭდვის თარიღს.

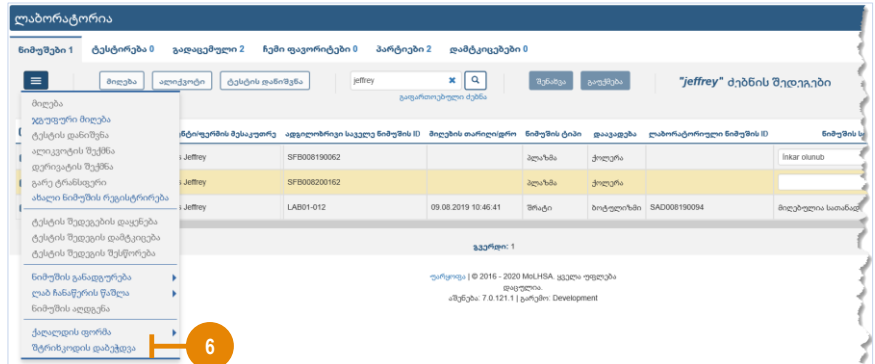

- დააწკაპუნეთ დაბეჭდვაზე. კომპიუტერის დაბეჭდვის ფანჯარა გამოჩნდება.



- იმოქმედეთ თქვენი დანადგარის ინსტრუქციების მიხედვით. ნიმუშის შტრის კოდები დაბეჭდილია.

